

OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ИНСУФЛЯТОР CO₂

OLYMPUS UCR

UCR

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ CO₂ ИНСУФЛЯТОР




UCR ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ CO₂ ИНСУФФЛЯТОР

- Проведение эндоскопических процедур с использованием углекислого газа позволяет минимизировать болевые ощущения пациента, связанные с растяжением брюшных мышц в ходе процедуры, а также ускоряет восстановительный период
- Всего одна кнопка для запуска/остановки, датчик давления и функция «таймер» созданы для простого управления и автоматического контроля инсуффляции
- Компактный дизайн UCR от OLYMPUS позволяет устанавливать прибор на эндоскопической тележке


Особые свойства CO₂

Углекислый газ абсорбируется в тканях в 150 раз быстрее, чем обычный воздух.

При использовании CO₂ инсуффляции

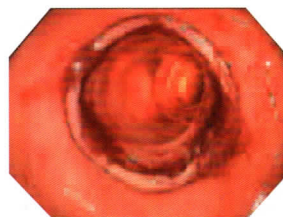

Сразу после инсуффляции

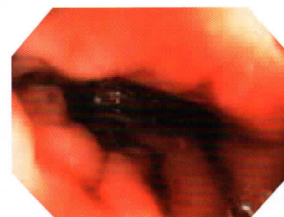

Через 2 минуты


Используемые изображения демонстрируют абсорбционный показатель при использовании UCR. Индивидуальные результаты могут варьироваться.

Характеристики

Электропитание	Напряжение (перем.ток)	100 - 200 Вт
	Частота	50/60 Гц
	Вход	40 ВА
Габариты (мм)	125 (ширина) x 300 (глубина) x 150 (высота)	
Вес	4,9 кг	
Допустимый газ	Газ CO ₂ для медицинских целей	(подключение к газовому баллону с CO ₂ или центральному газоснабжению)
Давление подаваемого воздуха	Макс. подаваемое давление	45 к ПА



Обзор системы

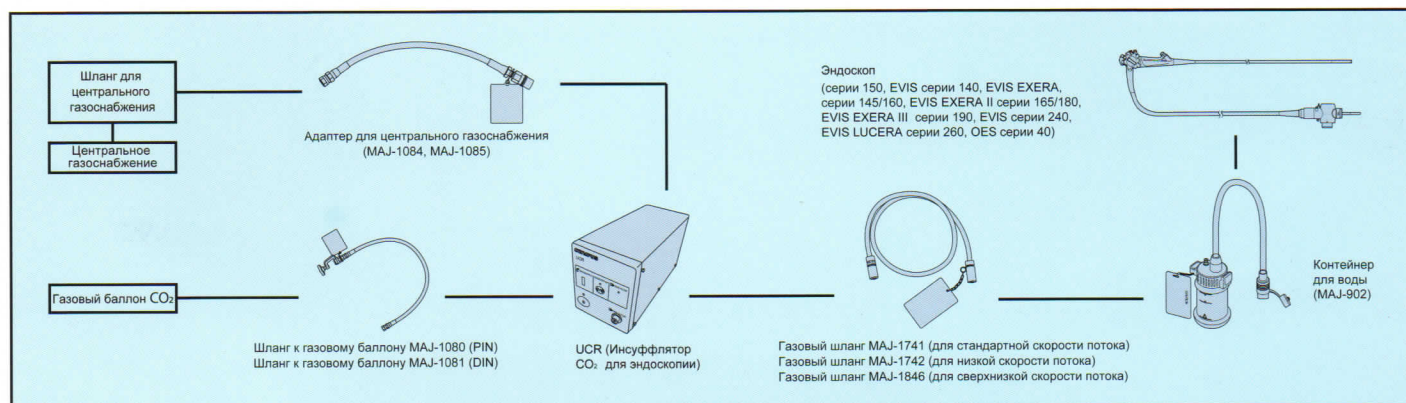

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом маркетинга по телефону +7 (495) 735-45-78 или посетите наш сайт www.olympus-europa.com